

Toilet veiligheidsframe / Toilet Safety Frame / Toiletten-Sicherheitsrahmen

🇳🇱 Onderdelen:

- 2x Poten (A)
- 2x Armleuningen (B)
- 2x Hoek frame (C)
- 1x Beugel (D)

🇩🇪 Parts:

- 2x Legs (A)
- 2x Armrests (B)
- 2x Angle frame (C)
- 1x Bracket (D)

🇩🇪 Teile:


- 2x Beine (A)
- 2x Armlehnen (B)
- 2x Eckige Rahmen (C)
- 1x Halterung (D)



INSTALLATIE INSTRUCTIES - Maximaal gebruikersgewicht: 136 KG (300 LBS)

1. Draai de bouten van de toiletbril los en verwijder de toiletbril.
2. Plaats de railmontageflens op het toilet en lijn de gaten uit. Zorg ervoor dat de buis op de beugel zich het dichtst bij het reservoir bevindt (afbeelding 1).
3. Plaats de toiletbril weer terug en lijn de gaten uit (afbeelding 1).
4. Plaats de bouten terug door de gaten van de toiletbril en de beugel van het frame en bevestig het frame en de bril door de bouten aan te draaien.
5. Monteer het veiligheidsframe door de korte buis in de armbuis te steken (afbeelding 2).
6. Schuif hulprails in de beugel en bevestig deze met de ingebouwde klik knoppen.
7. Stel de rails in op de gewenste hoogte en breedte door gebruik te maken van de ingebouwde klik knoppen. Kijk voor gebruik goed na of de knoppen goed in de gaten zijn geklikt.
8. Gebruik altijd allebei de handen wanneer je jezelf laat zakken op de toiletbril, of wanneer je weer gaat staan.


1

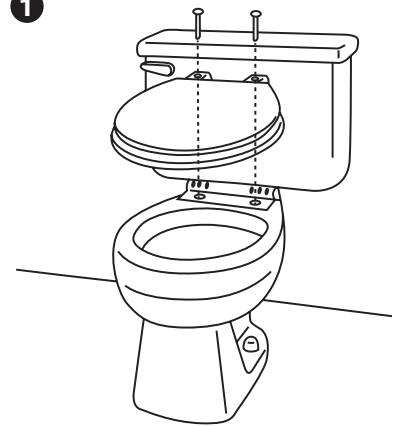

INSTALLATION INSTRUCTIONS - Weight capacity: 300 LBS (136 KG)

1. Detach seat by first removing toilet seat bolts.
2. Place the rail mounting flange on the toilet and align the holes. Ensure tube on bracket is closest to the tank (Fig. 1).
3. Place toilet seat and align holes (Fig. 1).
4. Insert bolts through toilet seat and bracket using original nuts and secure.
5. Assemble safety frame by inserting short tube into arm tube as shown in Fig. 2.
6. Slide assist rails into bracket and secure them with built-in snap buttons (Fig. 2).
7. Set rail to desired width and height using the built-in snap buttons. Make sure all built-in snap buttons are secured before use of the product.
8. Use both hands whenever lowering or raising yourself from the toilet seating surface.

2

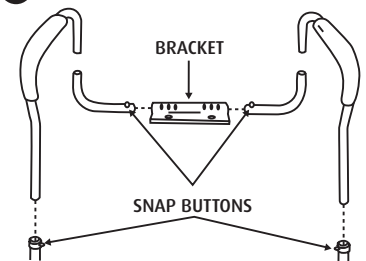

INSTALLATIONSANLEITUNG - Gewichtskapazität: 300 LBS (136 KG)

1. Nehmen Sie den Sitz ab, indem Sie zuerst die Toiletten sitzschrauben entfernen.
2. Setzen Sie den Schienenmontage Flansch auf die Toilette und richten Sie die Löcher aus. Stellen Sie sicher, dass das Rohr an der Halterung dem Spülkasten am nächsten ist. (Abb. 1).
3. Toiletensitz platzieren und Löcher ausrichten (Abb. 1).
4. Führen Sie die Schrauben durch den Toiletensitz und die Halterung mit Originalmuttern und sichern.
5. Montieren Sie das Sicherheitsrahmen durch die kurza Rohre in dem Armlehne-Rohre zu schieben, wie in abb. 2 gezeigt.
6. Dann die Rohre in die Halterung schieben und befestigen mit eingebauten Klick-Knöpfen (Abb. 2).
7. Stellen Sie den Rahmen auf die gewünschte Breite und Höhe mit Hilfe der Klick-Knöpfen ein. Stellen Sie sicher, dass alle eingebauten Klick-Knöpfen vor der Verwendung des Produkts gesichert sind.
8. Beim Absenken oder Aufstehen von der Toilettensitzfläche beide Hände benutzen.

3

